

AMS700™
Three-Piece Penile Implant

Najbardziej popularna na świecie hydrauliczna proteza prącia

AMS 700™

AMS 700™ firmy **Boston Scientific** to **hydrauliczna proteza prącia**, która definitywnie rozwiązuje problem z **zaburzeniem erekcji**. Proteza prącia naśladuje naturalną erekcję, zapewniając sztywność po wypełnieniu cylindrów i naturalny zwiotczały wygląd po deaktywacji implantu. Proteza prącia **AMS 700™** pozwala trwale usunąć problem związany z zaburzeniami erekcji. Zabieg polega na wszczepieniu protezy prącia (implantu) do ciał jamistych, umożliwiającej odbycie stosunku płciowego.

AMS 700™ składa się z pary cylindrów, które implantowane są do penisa, pompki wszczepianej do moszny oraz zbiornika umieszczonego w podbrzuszu.

Niskoprofilowy zbiornik Conceal™

- S Zbiornik płynu implantowany do jamy brzusznej, powlekany parylemem w celu zwiększenia jego trwałości².

Konstrukcja przedłużenia cylindra i tylnej końcówki (RTE)

- S Zredukowany profil ułatwia umieszczenie implantu w odcinku proksymalnym ciał jamistych, nawet w trudnych do poszerzenia przypadkach²
- S Końcówki Snap-Fit™ RTE optymalizują dopasowanie i zapewniają bezpieczne, sztywne połączenie²
- S Szeroki zakres długości końcówek RTE zapewnia indywidualne dopasowanie do anatomii pacjenta (dostępne w odstępach 0,5 cm, od 0,5-7,5 cm).

Pompka Momentary Squeeze (MS)

- S Pompka wszczepiana do worka mosznowego. Zaprojektowana tak, aby zapobiec niezamierzonemu automatycznemu wypełnianiu cylindrów²
- S Przycisk „one-touch” zapewnia łatwiejsze opróżnienie cylindrów, a mały rozmiar gwarantuje komfort pacjenta².

Ośłona antybiotykowa Inhibizone

- S Jedyna na rynku hydrauliczna proteza prącia z impregnowaną osłoną antybiotykową³
- S Obniża ryzyko powstawania infekcji po zabiegu⁴.

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA⁴

- S Protezy prącia przeciwwskazane są u pacjentów z czynnymi zakażeniami układu moczowo-płciowego lub skóry (w rejonie zabiegu chirurgicznego).
- S Proteza prącia pokryta powłoką antybiotykową InhibiZone nie jest wskazana u osób z alergią lub wrażliwością na ryfampinę (ryfampicynę), minocyklinę oraz inne tetracykliny.
- S Zabieg uniemożliwi naturalne, spontaniczne erekcje oraz inne opcje leczenia interwencyjnego.
- S Implant może spowodować skrzywienie, skrócenie lub zbliznowacenie prącia.
- S Pacjenci z cukrzycą, urazami rdzenia kręgowego lub otwartymi ranami mogą mieć zwiększone ryzyko zakażenia.

1 F. Montorsi, et al. AMS Three-Piece Inflatable Implants for Erectile Dysfunction: A Long-Term Multi-Institution Study in 200 Consecutive Patients: Eur Urol. 2000; 37: 50-55.

2 Data on file at AMS

3 FDA/PDP D970012-S065

4 AMS 700 with MS Pump™ Penile Prosthesis Product Line Instructions for Use. American Medical Systems. 2013.

AMS 700™ MSSeries



Hydrauliczna proteza prącia LGX

S Cylindry LGX zostały zaprojektowane w celu zoptymalizowania długości oraz obwodu prącia, z możliwym jego wydłużeniem do 20%, w zależności od anatomii pacjenta.

PRODUKT	Numer katalogowy implantu z InhibiZone
LGX Preconnect MS 12 cm, PS, IZ	72404250
LGX Preconnect MS 15 cm, PS, IZ	72404251
LGX Preconnect MS 18 cm, PS, IZ	72404252
LGX Preconnect MS 21 cm, PS, IZ	72404253
LGX Preconnect MS 12 cm, IP, IZ	72404255
LGX Preconnect MS 15 cm, IP, IZ	72404256
LGX Preconnect MS 18 cm, IP, IZ	72404257
LGX Preconnect MS 21 cm, IP, IZ	72404258

Hydrauliczna proteza prącia CXR

S Cylindry CXR zostały skonstruowane tak, aby zoptymalizować obwód. Dostępne są w różnych opcjach długości, również dla pacjentów, u których wskazane jest użycie mniejszych cylindrów ze względu na zbliźnowacenia lub skrzywienia.

PRODUKT	Numer katalogowy implantu z InhibiZone
CX Preconnect MS 12 cm, PS, IZ	72404230
CX Preconnect MS 15 cm, PS, IZ	72404231
CX Preconnect MS 18 cm, PS, IZ	72404232
CX Preconnect MS 21 cm, PS, IZ	72404233
CX Preconnect MS 24 cm, PS, IZ	72404234*
CX Preconnect MS 12 cm, IP, IZ	72404235
CX Preconnect MS 15 cm, IP, IZ	72404236
CX Preconnect MS 18 cm, IP, IZ	72404237
CX Preconnect MS 21 cm, IP, IZ	72404238
CX Preconnect MS 24 cm, IP, IZ	72404239*

Hydrauliczna proteza prącia CX

S Cylindry CX optymalizują obwód prącia. Oferowane są różne opcje długości, które pozwalają na najlepsze dopasowanie do anatomii pacjenta.

PRODUKT	Numer katalogowy implantu z InhibiZone
CXR Preconnect MS, 10 cm PS, IZ	72404260
CXR Preconnect MS, 12 cm PS, IZ	72404261
CXR Preconnect MS, 14 cm PS, IZ	72404262
CXR Preconnect MS, 16 cm PS, IZ	72404263
CXR Preconnect MS, 18 cm PS, IZ	72404264
CXR Preconnect MS, 10 cm IP, IZ	72404265
CXR Preconnect MS, 12 cm IP, IZ	72404266
CXR Preconnect MS, 14 cm IP, IZ	72404267
CXR Preconnect MS, 16 cm IP, IZ	72404268
CXR Preconnect MS, 18 cm IP, IZ	72404269


Zbiorniki

PRODUKT	Numer katalogowy implantu z InhibiZone
Conceal™ Reservoir	720185-01
Reservoir, 65 mL, PC/IZ	72404155
Reservoir, 100 mL, PC/IZ	72404156

*Wszystkie protezy występują również bez osłony antybiotykowej InhibiZone


Wskaźnik satysfakcji po implantacji protezy prącia AMS 700

Pacjenci z protezą prącia AMS 700

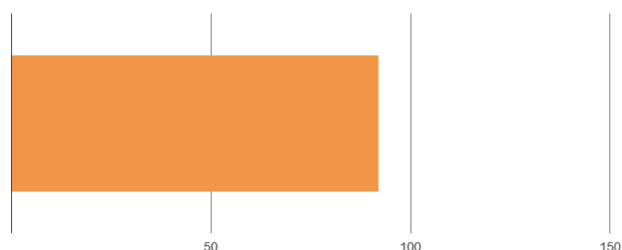

92% pacjentów określiło życie seksualne po wszczepieniu implantu jako doskonałe lub zadowolające

Zadowolenie partnerek osób z protezą prącia AMS 700

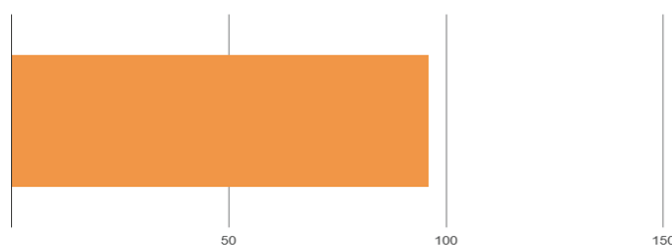

96% partnerek określiło życie seksualne po wszczepieniu implantu jako doskonałe lub zadowolające