

Lambda 175

Wózek kąpielowy



Lambda 175 jest to wózek kąpielowy zaprojektowany, by pomóc opiekunom osób niepełnosprawnych w czynnościach higienicznych bez narażania się na urazy kręgosłupa. Dzięki dużemu zakresowi podnoszenia (596 – 1055 mm) urządzenie przoduje w swojej klasie, ułatwiając kąpiel lub przebieranie pacjenta.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności pacjenta, boczne i końcowe poręcze posiadają możliwość blokowania w czterech różnych pozycjach. Po kąpeli woda jest odprowadzana drenami umieszczonymi w dnie leżyska, a 10° pochylenie łoża pozwala usunąć wodę, zwiększając wygodę suszenia pacjenta. Leże wyłożone jest gąbką i uzupełnione przez poduszkę, zapewniającą wygodę i komfort pacjenta.


Wózek posiada centralny hamulec oraz blokadę kierunkową. Krążki odbojowe zapobiegają uszkodzeniu podczas transportu. Urządzenie posiada elektryczną regulację wysokości, sterowaną za pomocą pilota. Siłownik wyposażony jest w przycisk bezpieczeństwa.

Zalety:

- model przoduje w swojej klasie pod względem regulacji wysokości,
- wózek w bezpieczny sposób pochyla się o 10°, a osoba pozostaje w miejscu,
- drenaż w materacu ułatwia całkowite odprowadzenie nagromadzonej wody, która wypływa przez wbudowane drenaży i wąż,
- łatwo toczące się koła umożliwiają maksimum sterowności, a centralny system hamulców zapobiega toczeniu się wózka w trakcie użytkowania,
- przejrzyste wzornictwo, zaprojektowane zgodnie z najnowszą technologią do użytku w domu, szpitalu lub ośrodku opiekuńczym.

Dane techniczne:

Zewnętrzny wymiar leżyska [cm]:	204,8 x 77
Wewnętrzny wymiar leżyska [cm]:	187 x 60
Zakres unoszenia [cm]:	59,6 - 105,5
Pozycja anty-Trendelenburga [°]:	10
Średnica kółek [cm]:	15
Maksymalny udźwig [kg]:	175
Waga urządzenia [kg]:	115
Regulacja wysokości:	elektryczna
Rama:	malowana proszkowo

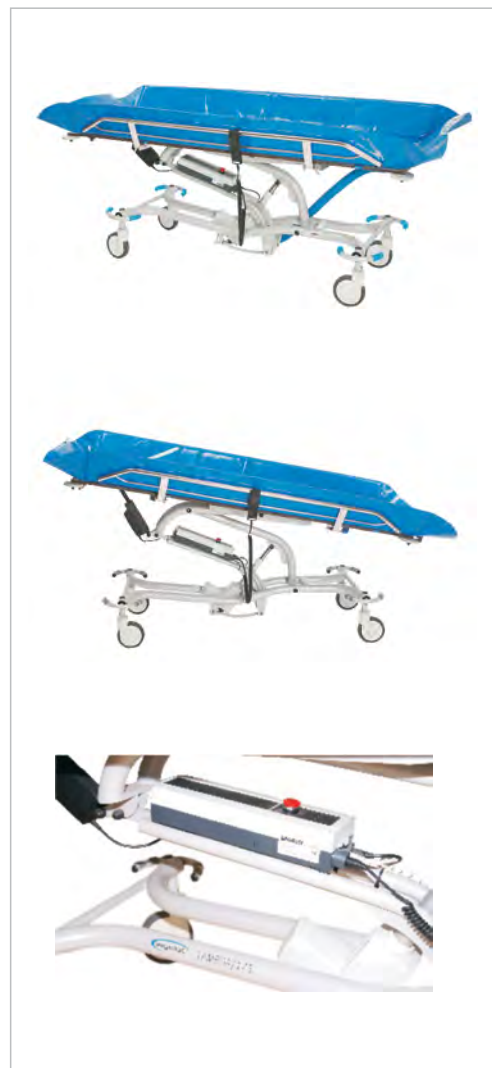

Akcesoria dodatkowe:

- materac do wanny LAMBDA,
- podparcie szyi do wanny LAMBDA.

