

LiteGait to urządzenia treningowe do jednoczesnej kontroli odciążenia, postawy, oraz balansu na bieżni i na stałym podłożu. Systemy do dynamicznego odciążenia to idealne rozwiązanie do treningu pacjentów w szerokim zakresie dysfunkcji funkcjonalnych. **LiteGait** pomaga w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała, redukuje obciążenie, eliminuje problem balansu oraz usprawnia trening koordynacji w ruchu. Unikatowe uprzącze zostały zaprojektowane nie tylko do jedno- lub dwustronnego podparcia ciała, ale także do progresywnej zmiany poziomu od pełnego obciążenia do pełnego odciążenia. Budowa umożliwia manualną kontrolę przez terapeutę nóg i miednicy w celu kontroli prawidłowego ruchu. Konfigurowalność urządzeń pozwala klinikom swobodnie leczyć ich pacjentów za pomocą tylko jednego systemu. Na podstawie specyfikacji można dobrać najbardziej optymalne rozwiązanie dla każdego.




Zalety systemów LiteGait:

- wspomaga balans, postawę, odciążenie,
- chroni przed nadmierną rotacją tułowia podczas terapii chodu,
- dynamiczne odciążenie pacjenta,
- niezależna kontrola lewej i prawej strony ciała,
- podparcie lewej i prawej strony ciała,
- chód swobodny lub na bieżni,
- kompaktowość umożliwia przechodzenie z pomieszczenia do pomieszczenia,
- swoboda pracy terapeuty,
- szeroki zakres doboru systemu do pacjentów,
- unoszenie pacjenta z wózka do pozycji stojącej,
- trening chodu w przód, na boki i do tyłu.

Opcje rozbudowy:

- system do swobodnego ruchu pacjenta **Freedome®** - dodatkowe akcesorium, które umożliwia swobodne obracanie mimo dwupunktowego podwieszenia. Podwieszenie takie zapewnia takie same bezpieczeństwo, jednocześnie nie zmniejszając funkcjonalności samego odciążenia. Mocowanie jest kompatybilne z wszystkimi modelami LiteGait i mocowane może być do produkowanych przez firmę systemów podczepienia. System może być zablokowany w 4 pozycjach (skok co 90 stopni) pozwalając pacjentowi na trening chodu bokiem, przodem, tyłem, na lub poza bieżnią,
- system pomiaru odciążenia **BiSym®** - jedno z najpopularniejszych dodatkowych rozwiązań do systemów LiteGait. Urządzenie pozwala na pomiar jedno- lub dwustronny stopnia odciążenia ciała,
- siedzisko dla terapeuty - dołączane jest bezpośrednio do podstawy systemu i ułatwia dostęp do kończyn dolnych pacjenta, zapewnia bezpieczną i efektywną pozycję terapeuty podczas pracy z pacjentem na bieżni lub podłożu stałym.

Unikatowy design **LiteGait** wspomaga trening balansu, postury oraz lokomocji ponieważ pozwala terapeutce na obserwację pacjenta oraz stały nadzór nad jego ruchem.

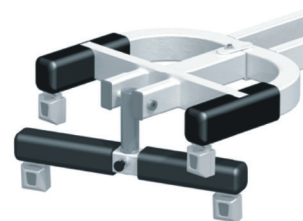

System Freedome®



System BiSym®



Siedzisko terapeuty



LiteGait WalkAble to najmniejsze urządzenie z rodziny LiteGait i jest perfekcyjnym rozwiązaniem dla dzieci o wadze do 45 kg. Uprząż komfortowo podpira ciało dziecka, a regulowane pasy umożliwiają trening symetryczny lub asymetryczny. Unikatowy design WalkAble pozwala na bezpieczne i łatwe pionizowanie pacjentów oraz kontrolę postury i balansu.



Dane techniczne:

	WalkAble 100KX	WalkAble 100KX z modułem Add-a-Lift	LG 135KE
Maksymalna wysokość [cm]:	201	198	239
Maksymalny wzrost pacjenta [cm]:	186	183	224
Maksymalna wysokość ramienia [cm]:	201	198	23
Minimalna wysokość ramienia [cm]:	128	66	170
Długość [cm]:	107	107	114
Zewnętrzny rozstaw ramy [cm]:	79	79	86
Wewnętrzny rozstaw ramy [cm]:	69	69	76
Prześwit [cm]:	45	45	45
Profil [cm]:	21	21	21
Maksymalna waga pacjenta [kg]:	45	100	135
Średnica kółek [cm]:	12,7	12,7	12,7