

# Terapeuta

Najwyższa jakość stołów do masażu i rehabilitacji




## Twój profesjonalizm wspierany przez nasze doświadczenie

— Linia stołów Terapeuta została zaprojektowana z myślą o Tobie i Twoich pacjentach. Narzędzie codziennej pracy jest jednocześnie sercem Twojego gabinetu. Łącząc nowoczesny design i funkcjonalność, oddajemy w Twoje ręce wyjątkowy produkt, który zaspokaja potrzeby każdego gabinetu.



## Stworzony z myślą o Tobie

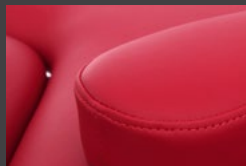

Najwyższej jakości, wytrzymała, precyzyjnie wykańczana tapicerka dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej.



Nowoczesne zabezpieczenie przed nieautoryzowaną zmianą ustawień stołu – zintegrowany system autoryzacji PAS.



PAS



Elegancki, ponadczasowy design i ergonomiczna konstrukcja stołu dla większego komfortu pracy.



Antypoślizgowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb systemy jezdne - mobilne F4 lub wyjątkowo stabilne F0.



*To nasza najlepsza dotychczasowa inwestycja! Serdecznie polecamy!*



**Lucjan Kasprzak**  
Fizjoterapeuta AZS Koszalin



**HalloTRONIC®**

Komfortowa regulacja wysokości



Wygodna regulacja zagłówek

**CLICK**

Regulowane boczki sekcji środkowej z automatycznym systemem blokowania (M-S7 i M-P7)






**CORE**  
Care

## Poczuj prawdziwy komfort pracy

— Ty troszczysz się o swoich Pacjentów, my dbamy o zdrowie Twojego kręgosłupa.

Praca fizjoterapeuty wiąże się z koniecznością przyjmowania niefizjologicznej pozycji ciała i wykonywania powtarzalnych ruchów, które są dużym obciążeniem dla układu mięśniowo-szkieletowego terapeuty. Troszcząc się o Twoje zdrowie prezentujemy unikalną technologię **Core Care**, która ułatwi Ci przyjęcie właściwej pozycji roboczej i ochronę kręgosłupa podczas pracy.

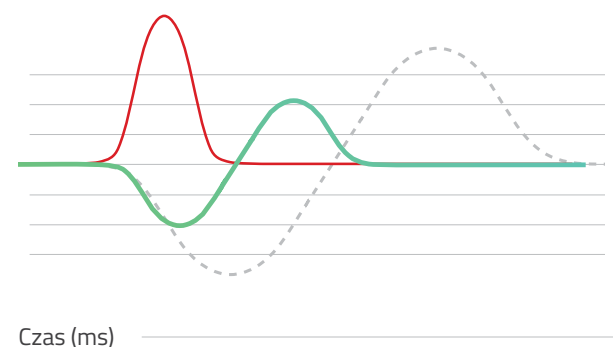

- Zastosowany nacisk.
- Poziom siły sprężystości stołów z linii Terapeuta.
- Poziom siły sprężystości stołu porównywalnej klasy.

### Czy problem dotyczy Ciebie:

- Stół sprężynuje, utrudniając Ci wykonywanie powtarzalnych, kontrolowanych ruchów?
- Pracując z Pacjentem, często pochylasz tułów do przodu bez podparcia?
- Podczas zabiegów utrzymujesz skrzywoną szyję lub pochyloną głowę?
- Przerывasz pracę, żeby dostosować wysokość stołu i uzyskać lepszy dostęp do Pacjenta?

### Zobacz, jak działa technologia CoreCare:

- Wzmocniona konstrukcja stołu wyposażona w stabilizację nóg ogranicza do minimum ruch pionowy spowodowany naciskiem, zapewniając powtarzalność ruchów przy zachowaniu tej samej siły.
- Szerokość leżyska stołów z linii Terapeuta odpowiada optymalnej przestrzeni roboczej. Masz swobodny dostęp do Pacjenta, bez nadmiernego pochylania tułowia do przodu.
- Unikalna funkcja regulacji wysokości za pomocą przełącznika nożnego umożliwia wykonywanie pracy bez konieczności zmiany pozycji i układu rąk, eliminuje także konieczność pochylania głowy.

## Wyjątkowe doznania dla Twoich Pacjentów

— Dla pacjenta komfort podczas zabiegu jest tak samo ważny, jak jego efekty. Z linią stołów Terapeuta możesz zagwarantować Pacjentom wygodę i poczucie bezpieczeństwa w czasie trwania terapii!

- Sprężysta i trwała pianka
- Otwór na twarz Pacjenta ułatwiający oddychanie
- Płynna regulacja wysokości i poszczególnych sekcji
- Wąskie łączenia sekcji stołu



## Nadaj kształt swojej praktyce

Leżysko linii stołów Terapeuta jest dostępne w czterech wersjach, dopasowanych do potrzeb Twojej praktyki. To Ty decydujesz, ile sekcji ma mieć Twój wymarzony stół. Opuszczane podłokietniki, a może dodatkowe boczki sekcji środkowej?

Indywidualna konfiguracja otwiera przed Tobą nowe możliwości. Jeszcze nigdy nie byłeś tak blisko Pacjenta!



S2

Leżysko 2-sekcyjne



S3 / P3

Leżysko 3-sekcyjne



S5 / P5

Leżysko 5-sekcyjne



S7 / P7

Leżysko 7-sekcyjne

## Dopasuj stół do Twoich preferencji

Stabilna, solidna rama oparta na sprawdzonej konstrukcji to gwarancja bezpieczeństwa pracy. Dla pełnego komfortu możesz wybrać system jezdny, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom.

- Jeżeli często zmieniasz położenie stołu w gabinecie, wybierz ramę wyposażoną w cztery kółka i cztery antypoślizgowe stopki - **F4**.
- Jeżeli stół stoi przeważnie w jednym miejscu, wystarczy rama z dwoma kółkami i dwoma stopkami - **F0**.

### F0

System jezdny składający się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.

### F4

System jezdny składający się z 4 unoszonych kół kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych, gumowych stopek.



HalloTRONIC®

# Terapeuta M-S2 | 2-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji



## Cechy charakterystyczne:

- łatwa regulacja zagłówek przy pomocy sprężyny gazowej,
- zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
- dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- bardzo stabilna stalowa rama,
- relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
- stół wyposażony w technologię HalloTRONIC®, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
- Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 magnetyczne klucze dostępu,
- malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron,
- antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu.


## Informacje do zamówień:

**M-S2.F0:** 2-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym, składającym się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.

**M-S2.F4:** 2-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym, składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych, gumowych stopek, małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.



## M-S2

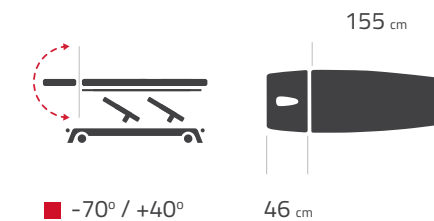

# Terapeuta M-S3 / M-P3

3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji



## Cechy charakterystyczne:

- pozycja pivota sterowana elektronicznie 2 przełącznikami po obu stronach stołu (M-P3),
- łatwa regulacja zagłówek przy pomocy sprężyny gazowej,
- zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
- łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych,
- rączka zwalnająca system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępna z obu stron stołu,
- ergonomiczny design,
- dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
- bardzo stabilna stalowa rama,
- relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
- stół wyposażony w technologię Hallotronic®, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
- Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 magnetyczne klucze dostępu,
- malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron,
- antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu.

## Informacje do zamówień:

**M-S3.F0:** 3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym, składającym się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.


**M-S3.F4:** 3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym, składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych, gumowych stopek, małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.

**M-P3.F0:** 3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z pozycją Pivota oraz systemem jezdnym, składającym się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.


**M-P3.F4:** 3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z pozycją Pivota oraz systemem jezdnym, składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych, gumowych stopek, małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.



## M-S3

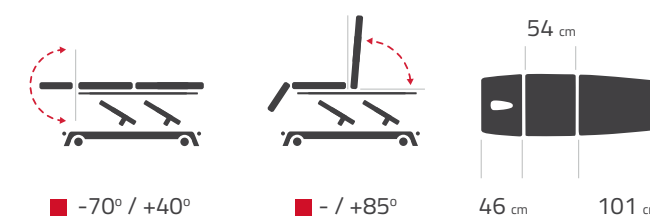

## M-P3

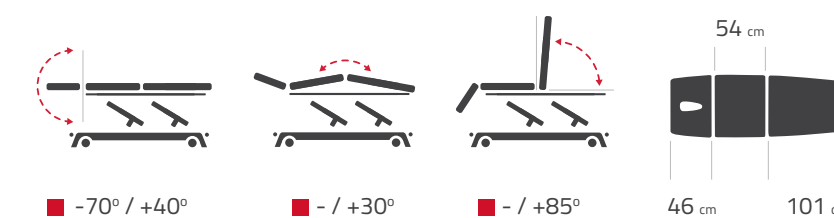



# Terapeuta M-S5 / M-P5

5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji



## Cechy charakterystyczne:

- pozycja pivota sterowana elektronicznie 2 przełącznikami po obu stronach stołu (M-P5),
- łatwa regulacja zagłówek przy pomocy sprężyny gazowej,
- zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
- łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych,
- rączka zwalnająca system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępna z obu stron stołu,
- ergonomiczny design,
- dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
- bardzo stabilna stalowa rama,
- relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
- stół wyposażony w technologię Hallotronic®, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
- Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 magnetyczne klucze dostępu,
- malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron,
- antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu.

## Informacje do zamówień:

**M-S5.F0:** 5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym, składającym się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.


**M-S5.F4:** 5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdym, składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych, gumowych stopek, małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.

**M-P5.F0:** 5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z pozycją Pivota oraz systemem jezdym, składającym się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.


**M-P5.F4:** 5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z pozycją Pivota oraz systemem jezdym, składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych, gumowych stopek, małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.



## M-S5

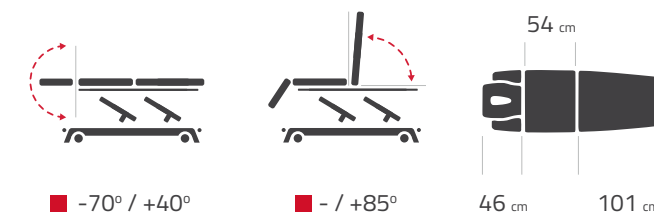

## M-P5

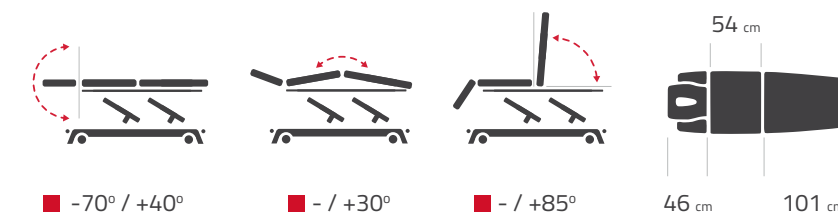

# Terapeuta M-S7 / M-P7

7-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji

## Cechy charakterystyczne:

- pozycja pivota sterowana elektronicznie 2 przełącznikami po obu stronach stołu (M-P7),
- łatwa regulacja zagłówek przy pomocy sprężyny gazowej,
- zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
- łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych,
- rączka zwalnająca system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępna z obu stron stołu,
- ergonomiczny design,
- dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
- bardzo stabilna stalowa rama,
- relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
- stół wyposażony w technologię HalloTRONIC®, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
- Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 magnetyczne klucze dostępu,
- malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron,
- antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu.

## Informacje do zamówień:

**M-S7.F0:** 7-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym, składającym się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.


**M-S7.F4:** 7-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym, składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych, gumowych stopek, małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.

**M-P7.F0:** 7-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z pozycją Pivota oraz systemem jezdnym, składającym się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.


**M-P7.F4:** 7-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z pozycją Pivota oraz systemem jezdnym, składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych, gumowych stopek, małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.



## M-S7

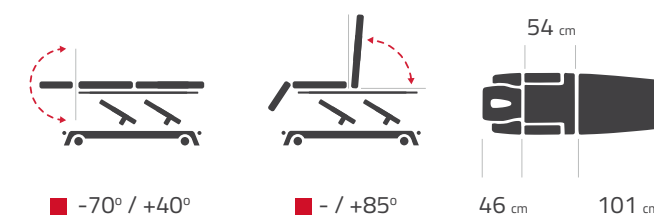


## M-P7

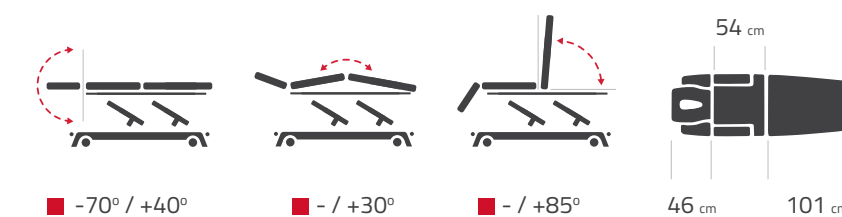



### Dane techniczne:

	M-S2	M-S3	M-P3	M-S5	M-P5	M-S7	M-P7
<b>Wymiary</b> (dł. x szer.) [cm]:	202 x 69	205 x 69	205 x 69	205 x 69	205 x 69	205 x 69	205 x 69
<b>Ilość sekcji:</b>	2	3	3	5	5	7	7
<b>Kąt regulacji zagłówka</b> [°]:	-70/+40	-70/+40	-70/+40	-70/+40	-70/+40	-70/+40	-70/+40
<b>Kąt regulacji sekcji środkowej</b> [°]:	-	-	0/+30	-	0/+30	-	0/+30
<b>Kąt regulacji sekcji nożnej</b> [°]:	-	0/+85	-30/+85	0/+85	-30/+85	0/+85	-30/+85
<b>Regulacja wysokości</b> [cm]:	47-95	47-95	51-99	47-95	51-99	47-95	51-99
<b>Masa maksymalna F0/F4</b> [kg]:	80/95	85/100	95/110	92/107	102/117	95/110	105/120
<b>Maksymalne obciążenie</b> [kg]:	225	225	225	225	225	225	225
<b>Zasilanie</b> [V/Hz]:	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50

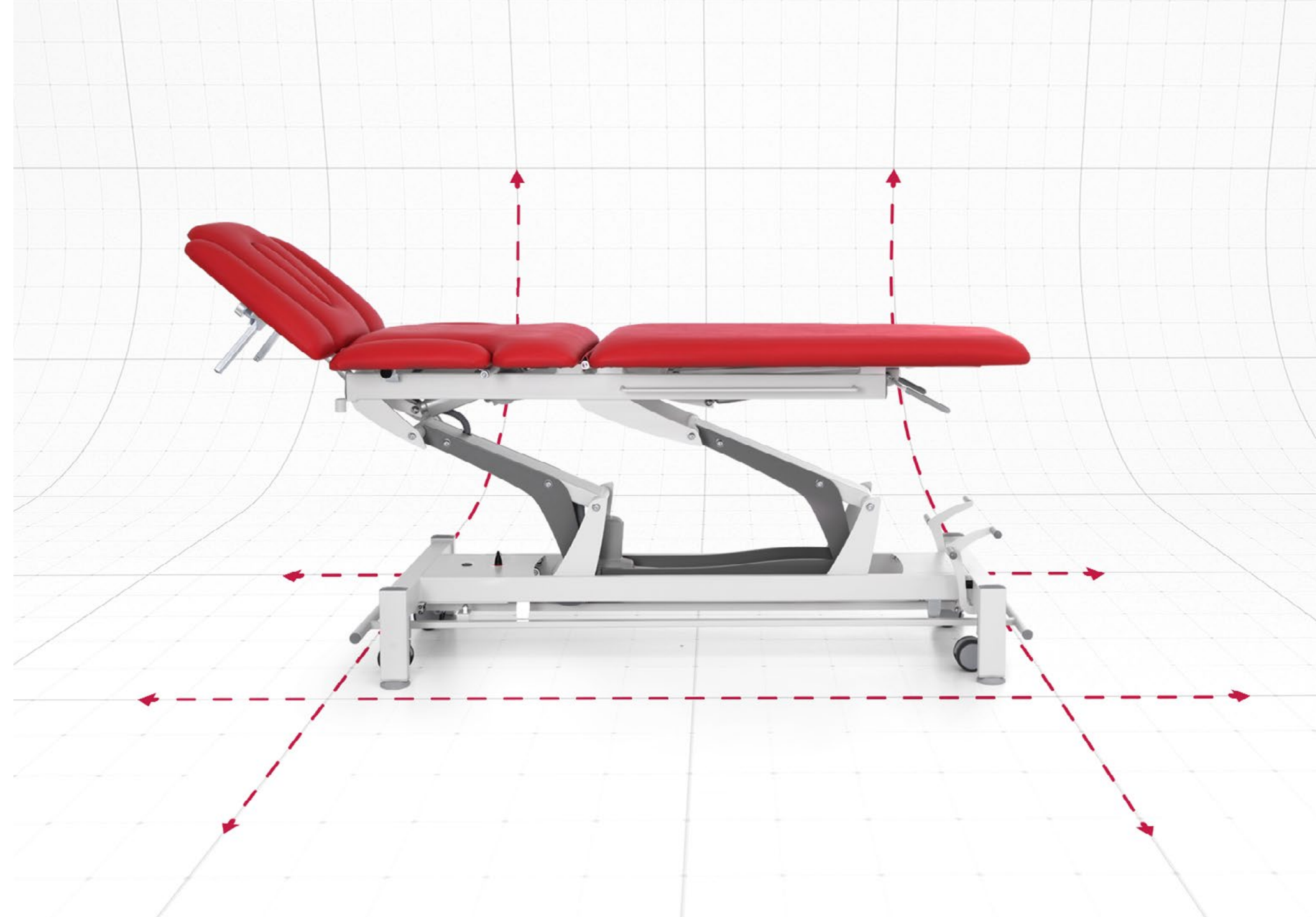

## Wykorzystaj wszystkie możliwości terapii

— Zróżnicowane potrzeby Twoich Pacjentów wymagają stosowania różnych technik manualnych. Szeroka oferta akcesoriów dedykowanych do stołów z linii Terapeuta, ułatwi Ci codzienną pracę i pozwoli na przeprowadzenie efektywnego zabiegu.

### Informacje do zamówień:

#### Numer:

001  
002-xx  
003  
004  
005-xx  
006-xx  
007-xx  
008-xx  
009-xx  
010-xx  
011-xx  
012-xx

#### Opis:

Wieszak do ręczników papierowych (1)  
Bananki do stabilizacji (2)  
Pas do stabilizacji (3)  
Klin Kaltenborna (4)  
Klin (70 x 60 x 25 cm) (5)  
Klin (50 x 35 x 20 cm) (6)  
Wałek (60 x 15 cm) (7)  
Półwałek (60 x 15 x 10 cm) (8)  
Półwałek (60 x 15 x 15 cm) (9)  
Klin (40 x 30 x 12 cm) (10)  
Wałek (60 x 10 cm) (11)  
Wałek (60 x 20 cm) (12)

Przy zamawianiu wybranych akcesoriów prosimy o podanie numeru części oraz koloru tapicerki, np.: aby zamówić beżowy wałek proszę wpisać: **Wałek 007-01**.










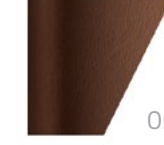






Wieszak do ręczników papierowych





## Stwórz niepowtarzalne wnętrze gabinetu

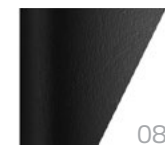— Dzięki bogatej paletce kolorystycznej oraz unikatowym właściwościom tapicerka spełnia oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.

 00 Ecrú	 01 Beżowy	 13 Pomarańczowy	 09 Czerwony
 06 Szary	 11 Miodowy	 04 Terakota	 14 Limonka
 07 Grafitowy	 05 Brązowy	 12 Morski	 10 Jasnozielony
 08 Czarny	 03 Granatowy	 02 Niebieski	 15 Błękitny



Odporna na działanie wysokich temperatur



Odporna na ciecze (woda, krew, solanka)



Miękka, elastyczna i komfortowa powłoka



Wysoce wytrzymała, odporna na zadrapania



Można czyścić wybranymi środkami do dezynfekcji, ale zalecamy czyszczenie tapicerki wyłącznie wodą z mydłem.

### Dane techniczne:

Tapicerka: skóra ekologiczna.  
Najwyższa jakość i funkcjonalność.

## Spójna wizja

---

Nowoczesny gabinet rehabilitacji łączy elegancki design z ergonomicznym i funkcjonalnym wyposażeniem. Dbamy o to, aby Twój gabinet został zaprojektowany z dbałością o każdy detal.

Wykorzystując kilkudziesięcioletnie doświadczenie w branży medycznej, kompleksowo wyposażamy największe placówki rehabilitacyjne i mniejsze gabinety.

Dla Ciebie tworzymy miejsce, które umożliwia komfortowe warunki pracy, a Twoim Pacjentom gwarantuje wyjątkowe doznania.

[www.meden.com.pl/oferta](http://www.meden.com.pl/oferta)

Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie może być traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 K.C. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektów bez wpływu na zasadnicze funkcje wyrobu i wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Pomimo dołożenia wszelkich starań kolory zaprezentowane w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistości.





Meden-Inmed Sp. z o. o.  
Wenedów 2, 75-847 Koszalin, Polska

Tel.: +48 94 347 10 50 (53)

Fax: +48 94 345 40 55

fizjoterapia@meden.com.pl

www.meden.com.pl



Skonfiguruj stół rehabilitacyjny dopasowany do potrzeb Twojej praktyki na:  
[www.meden.com.pl/terapeuta](http://www.meden.com.pl/terapeuta)

