

# AQUAI

Urządzenie do masażu membranowego



Ten katalog zawiera informacje dotyczące m.in. wyrobu medycznego, który powinien być obsługiwany przez wykwalifikowany personel medyczny i stosowany zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



# Którym pacjentom mógłbyś polecić urządzenie **AQUAI**?

## CELE RELAKSACYJNE

Współczesne tempo życia, problemy zawodowe i rodzinne sprawiają, że twoi pacjenci są poddawani stresowi silniejszemu niż kiedykolwiek. Poświęcają zbyt mało czasu własnym potrzebom. Urządzenie **AQUAI** prowadzi do zwiększonego wydzielania endorfin i wpływa rozluźniająco i relaksująco na organizm. Łagodzi i redukuje stres.

## ZAPOBIEGANIE

Podczas używania **AQUAI** wzmagane jest krążenie krwi w organizmie, zwiększany jest transport tlenu do mięśni oraz usprawniany przepływ limfy z jednoczesnym przyspieszeniem usuwania produktów przemiany materii.

## TERAPIA

Podczas masażu na urządzeniu **AQUAI**, dzięki ruchom masującym i termicznemu działaniu ciepłej wody o temperaturze około 38°C, następuje wywieranie oraz zwalnianie ucisku na tkanki miękkie. Wzmaga to krążenie krwi w organizmie.

## ROZLUŻNIENIE MIĘŚNI

**AQUAI** to urządzenie o zaawansowanej konstrukcji, specjalnie zaprojektowane i przeznaczone do wykonywania zabiegów masażu membranowego. Podczas zabiegu masażu membranowego wykorzystuje się w celach terapeutycznych i relaksacyjnych oddziaływanie mechaniczne silnego strumienia ciepłej wody, uderzającego w membranę wykonaną ze specjalnego tworzywa, która przenosi to oddziaływanie na ciało pacjenta.



## Dla Twojej wygody i relaksu

**AQUAI** to urządzenie o zaawansowanej konstrukcji, specjalnie zaprojektowane i przeznaczone do wykonywania zabiegów masażu membranowego.

Podczas zabiegu masażu membranowego, wykorzystuje się w celach terapeutycznych i relaksacyjnych, oddziaływanie mechaniczne silnego strumienia ciepłej wody, uderzającego w membranę wykonaną ze specjalnego tworzywa, która przenosi to oddziaływanie na ciało pacjenta.

### Wskazania do wykonywania zabiegu są podobne, jak i przy tradycyjnym suchym masażu ręcznym:

- rekonwalescencja,
- masaż kondycyjny,
- zapobieganie zaburzeniom układu krążenia,
- nerwice typu psychogenne,
- otyłość i nadwaga.



Łatwość transportu pacjenta



Ergonomia i komfort





## Cechy urządzenia

- 6 programowalnych, niezależnych stref masujących,
- jednoczesna praca wszystkich otworów wylotowych,
- dysze do suchego hydromasażu o zwiększonej trwałości,
- 6 programów standardowych,
- 1 program użytkownika,
- regulacja temperatury powierzchni membrany w zakresie od 30 do 40°C,
- regulacja czasu trwania masażu (1 - 30 min),
- możliwość opóźnionego startu,
- regulacja częstotliwości oraz kolejności zmiany stref,
- zintegrowany system grzewczy,
- wewnętrzny system chłodzenia wodnego utrzymuje temperaturę wody w zdefiniowanym czasie niezależnie od liczby zabiegów,
- nie wymaga podłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- łatwy w obsłudze, dotykowy panel sterujący z kolorowym wyświetlaczem,
- podświetlenie LED u podstawy.



**Komfortowa  
temperatura wody**

od 30 do 40°C



**Łatwa  
instalacja**

230 V



**Delikatna muzyka płynąca  
z dwóch głośników**

Opcja audio



**Ochrona przed objawami  
choroby lokomocyjnej**

Unikatowa membrana

Wyobraź sobie spa inne niż wszystkie.  
Połączenie czystego piękna i ergonomii.  
Wyobraź sobie elegancję inspirowaną harmonią natury.  
Witamy w **świecie AQUAI**.




Uruchamianie  
jednym dotknięciem






## Interfejs przyjazny dla użytkownika

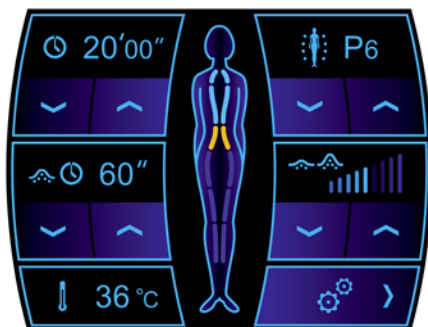


### Główny ekran

- dostosowywanie ustawień przed rozpoczęciem zabiegu oraz w jego trakcie,
- wybór programu, czasu trwania zabiegu, kolejności zmiany stref oraz innych ustawień podczas zabiegu,
- ekran powitalny po 3 minutach bezczynności.

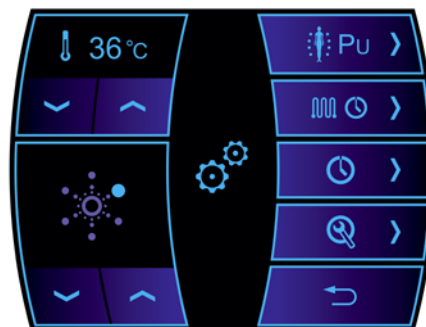

### Konfiguracja ekranu


- regulacja temperatury wody w zakresie od 30 do 40°C,
- wybór koloru podświetlenia LED w podstawie,
- łatwy dostęp do ekranu edycji programu użytkownika,
- ekran konfiguracji automatycznego przygotowania,
- szybki dostęp do ustawień zegara.

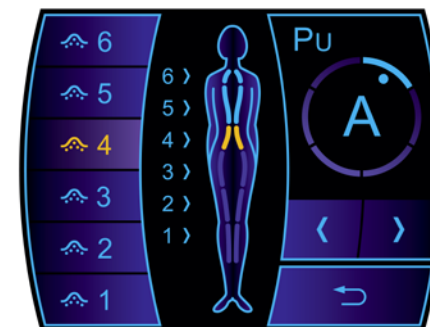

### Edycja programu użytkownika

- możliwość wyboru stref dla każdego etapu,
- wyświetlanie aktualnie używanych stref (na żółto) oraz kolejnych stref (na niebiesko),
- 6 stref działających w określonej kolejności,
- do 3 stref działających jednocześnie.


## 6 niezależnych stref

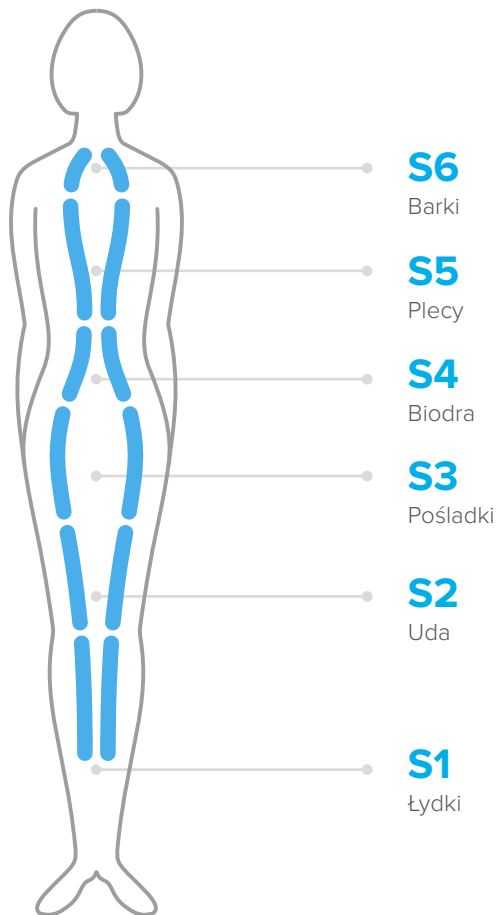

Odkryj nowy poziom suchego hydromasażu.


Teraz to Ty decydujesz, która część ciała ma być masowana. Zaprogramuj każdą z 6 w pełni niezależnych stref roboczych, aby uzyskać jeszcze lepsze wyniki leczenia. Hydromasaż całego ciała zapewniający głębokie rozluźnienie barków, łagodzący ból szyi lub ud i łydek poprawiający zakres ruchu.

Odkryj rewolucyjny świat AQUAI i zapewnij swoim pacjentom niezapomniane doświadczenia leczenia!

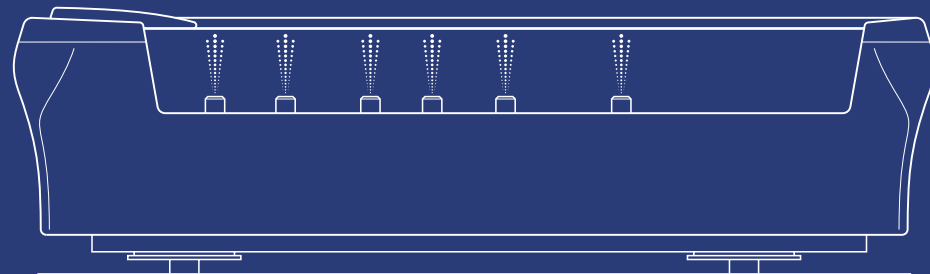



Silny masaż o dużej  
skuteczności

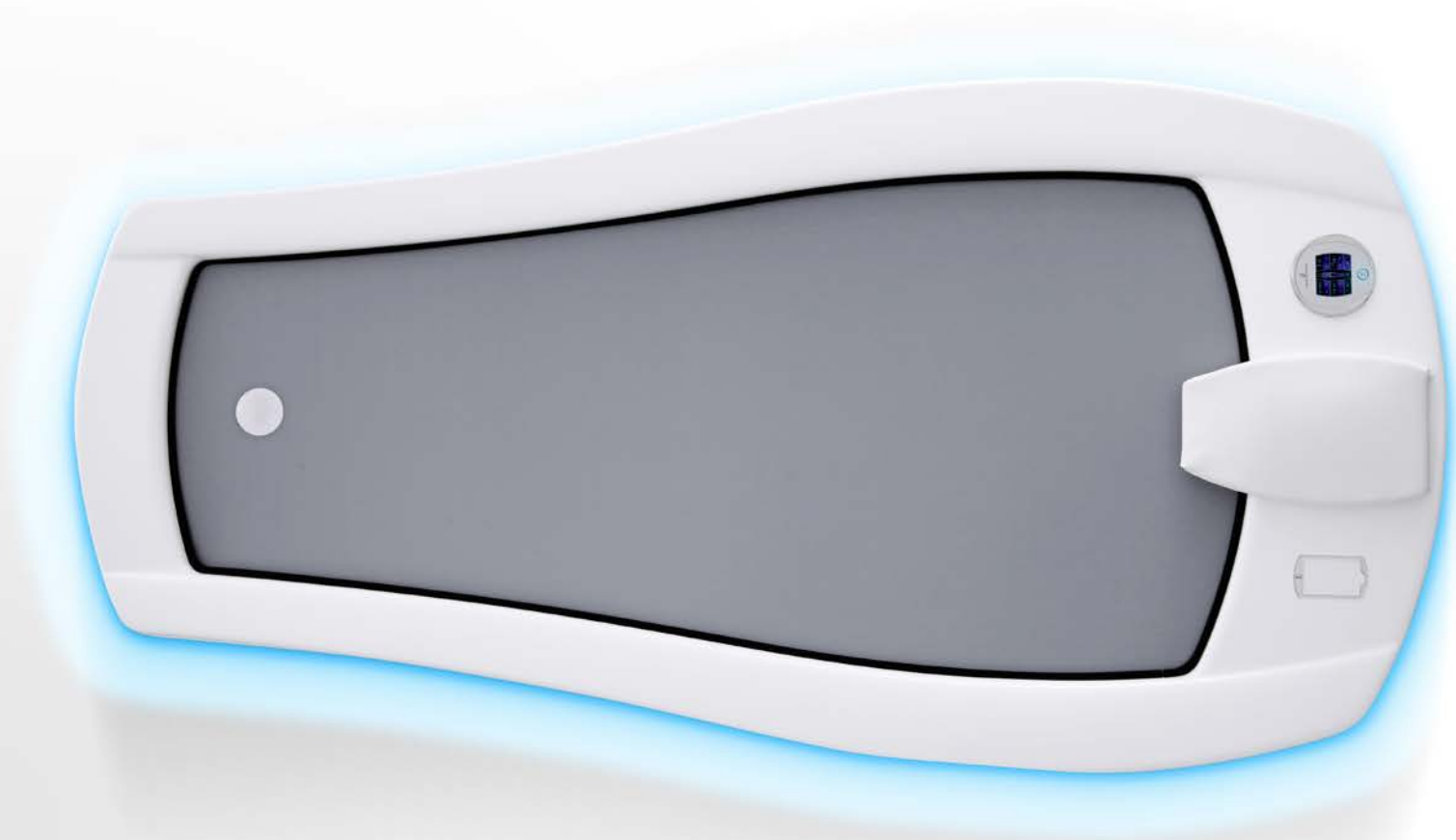

## Opcje **dotatkowe**



### **KARTY Z KREDYTEM**


System ułatwiający sprzedaż zabiegów poprzez wykorzystanie kart z kredytem; w zestawie oprogramowanie umożliwiające doładowanie kart.



### **AUDIO**

System głośników z funkcją odtwarzania dźwięku z urządzeń zewnętrznych, takich jak HiFi, MP3 lub Bluetooth.



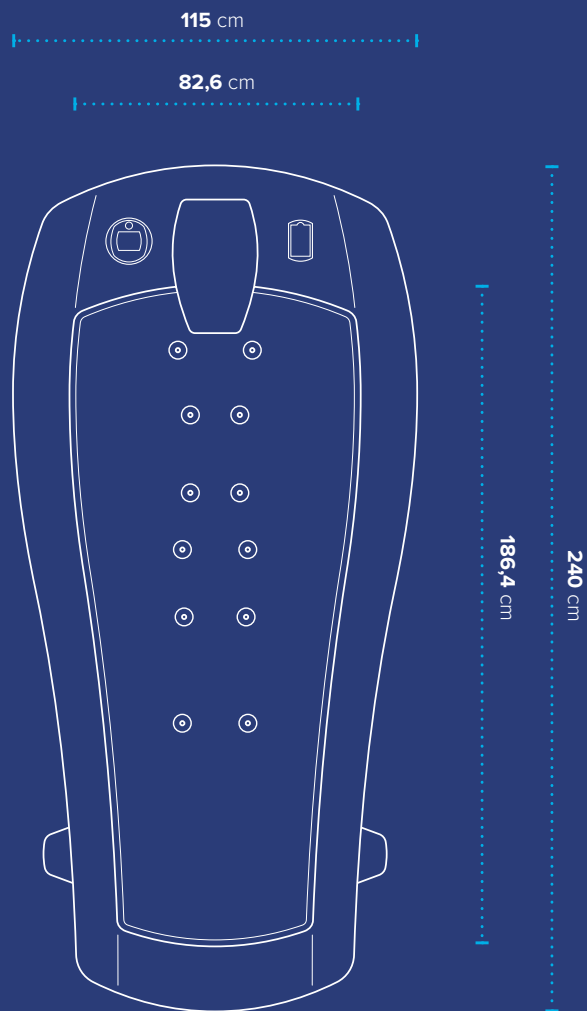

## Dane techniczne

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	240 x 115 x 65
Pojemność [l]:	220
Waga [kg]:	190
Maks. obciążenie [kg]:	135
Kolor zbiornika:	biały
Klasa ochrony:	I
Źródło zasilania [V/Hz]:	230/50 lub 400/50

Niecka urządzenia oraz obudowa zostały wykonane z żywicy poliestrowej, wzmocnionej włóknem szklanym. Zastosowanie takich materiałów gwarantuje wieloletnią i bezawaryjną pracę urządzenia. Instalacja wodna, z wyjątkiem przyłączy i zaworów została wykonana z tworzywa PVC, co zapewnia jej dużą niezawodność.



Długość: **240 cm**



Wysokość: **65 cm**



Szerokość: **115 cm**



Maks. obciążenie: **135 kg**



Waga: **190 kg**





**Meden-Inmed Sp. z o.o.**

ul.Wenedów 2, 75-847 Koszalin

Tel.: +48 94 347 10 50 / 53

fizjoterapia@meden.com.pl

www.meden.com.pl

